



DELPHI

EASY SAMPLER[®]

Specimen Collection Kit

BRUGSANVISNING

[EasySampler.com](https://www.EasySampler.com)



CE EasySampler[®] patented

GP Medical Devices A/s, www.GPMD.dk

Copyright © 2023 GP Medical Devices A/s

AFFØRINGSPRØVE

Trin 1:


Forberedelse og montering
af EasySampler




Husk at tisse af inden
afføringsprøven indsamles.
Slå toiletsædet op før
EasySampler monteres.




Kransen på toiletkummen
aftørres med toiletpapir så
EasySampler kan monteres på
en ren og tør overflade

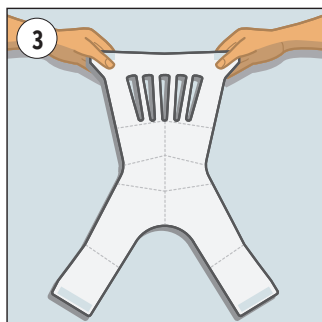


EasySampler foldes ud.
EasySampler må ikke berøre
vandet.

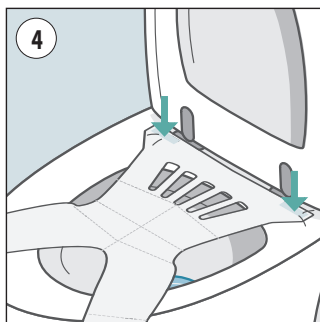

Tapebeskyttelsen fjernes på de
bagerste flapper og EasySampler
monteres bagerst på kummen.

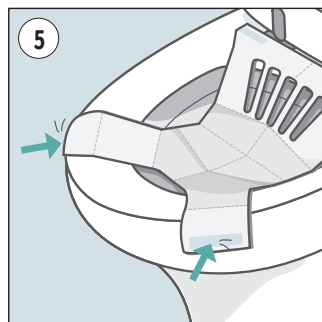


Tapebeskyttelsen fjernes på de
forreste flapper og monteres
midt på kummen, således at toi-
letpapiret kan smides i kummen.

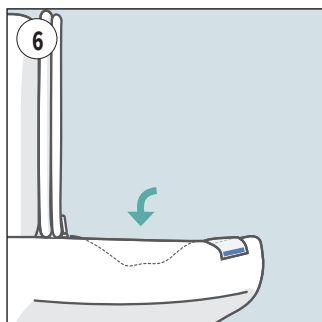

Vigtigt: Det er vigtigt at
EasySampler monteres så den
danner en fordybning.



Slå toiletsædet ned og
EasySampler er klar til brug.

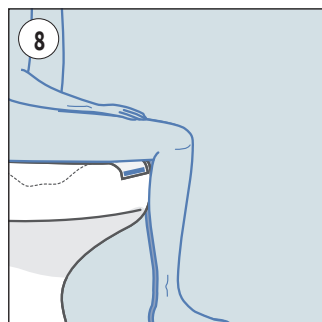


Hav afføring som normalt.
Undgå så vidt muligt at der
kommer urin ned i EasySampler.

OBS: Efter prøveindsamlingen skal du svare på hvilken "type" afføring du havde. Læg derfor
mærke til udseendet på din afføring.


Trin 2:
Opsamling af
afføringsprøven




Tag handskerne på.

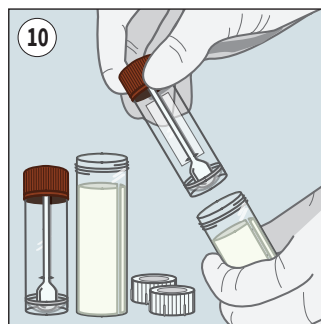


Åben begge forsendelsesrør og tag prøverørene op. Lad det absorberende materiale blive i forsendelsesrørene.

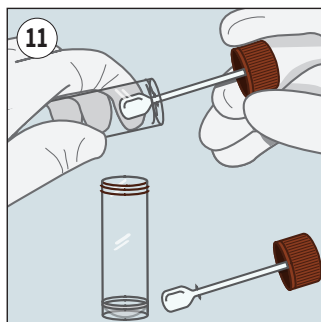


Åben begge prøverørene.

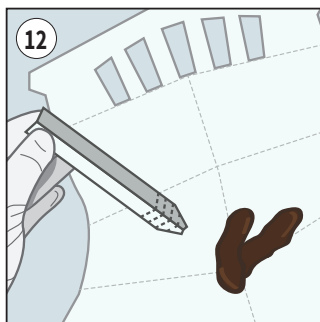


Med den ene papirske optages afføring.

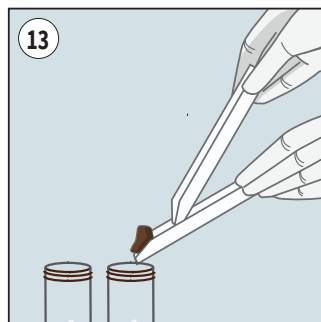


Med den anden papirske skubbes afføring ned i prøverøret. Gentag dette til du har fyldt begge prøverørene halvt op.

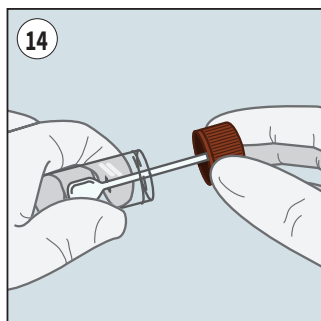


Skru lågene godt til på prøverørene, så lækage undgås.

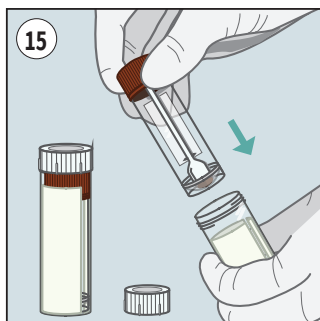


Prøverørene kommer tilbage i forsendelsesrørene. Det absorberende materiale skal blive mellem de to beholdere. Skru lågene på forsendelsesrørene.

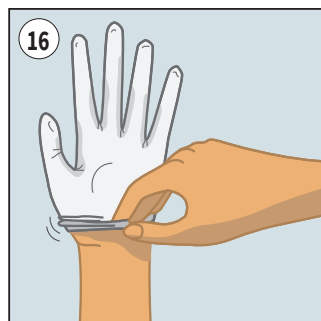

Vrid handskerne af over papirskeerne og smid dem i skraldespanden.

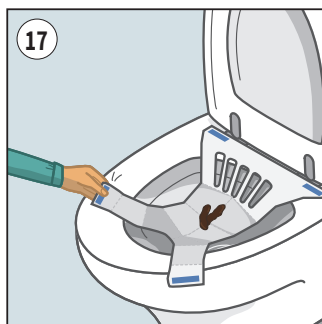


Løsn EasySampler og skyl den ud i toilettet.

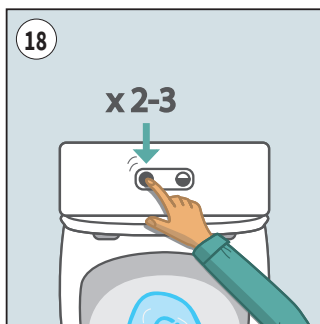

Ved vandsparende toiletter anvendes stort skyl. Der bør trækkes ud 2-3 gange svarende til ca. 10 - 15 L vand. Eventuelle tape rester aftørres med husholdnings sprit.


Trin 3: Opbevaring af afføringsprøven

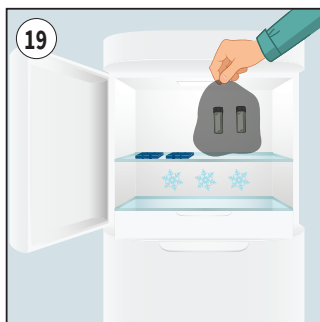

Placer begge forseglede prøverør i den medfølgende sorte plastikpose, og opbevar dem i **fryseren**. Husk også at lægge fryseelementerne i **fryseren**.

URINPRØVE

Trin 1: Forberedelse

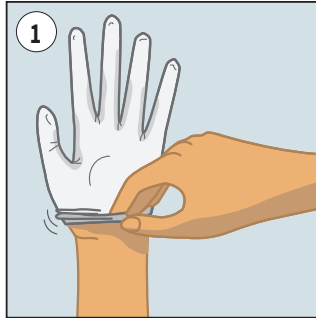


Tag handskerne på.




Pak prøveglasset ud af pakningen og skru låget af.


Trin 2: Opsamling af urinprøven

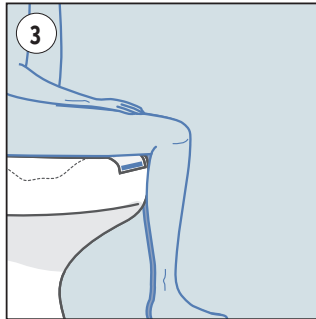


Begynd at lade vandet i toiletet.

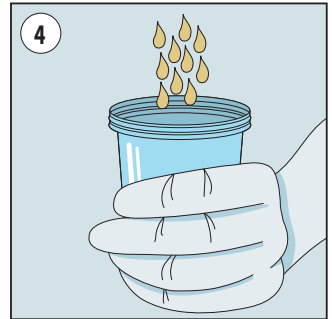


Ved ca. halvtømt blære fører du prøveglasset ind i urinstrålen, og opsamler urin indtil prøveglasset er halvt fyldt.

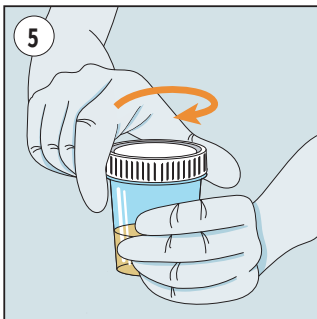

Skru låget på prøveglasset igen. Tør prøveglassets yderside med toiletpapir.

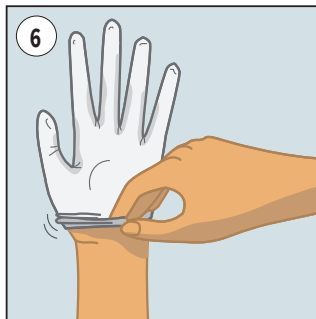


Tag handskerne af.

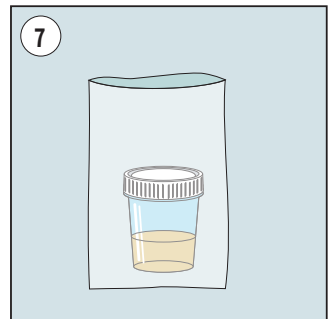


Put prøveglasset med urinprøven i den udleverede hvide pose.

Trin 3:
Opbevaring af urinprøven

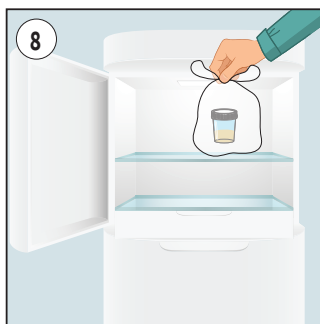


Opbevar den hvide pose med urinprøven i **køleskabet** indtil du skal ind på klinikken.

AFLEVERING AF INDSAMLEDE PRØVER

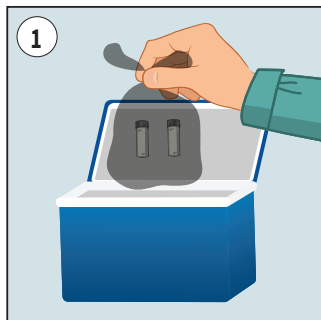


Put den sorte pose med de frosne afføringsprøver i køletasken.

HUSK at lægge køleelementerne i køletasken også.

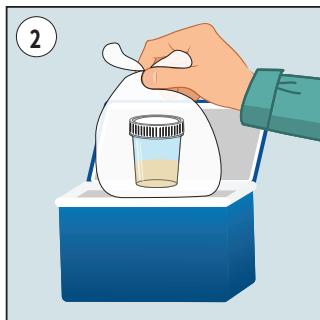

Put også den hvide pose med urinprøven i køletasken. Husk at lukke køletasken.

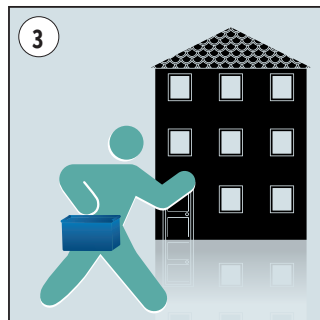

Returner køletasken med de indsamlede prøver til klinikken i henhold til dine instruktioner.